

# ミスゼロ子 e v 薬品マスタ更新手順書（リモート）

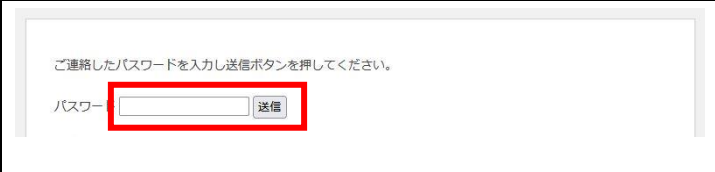

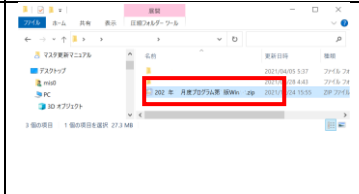
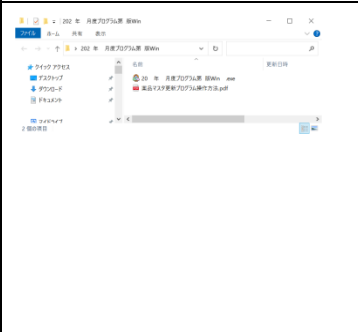
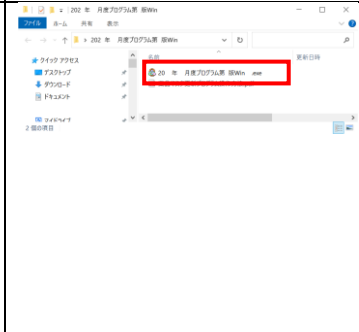
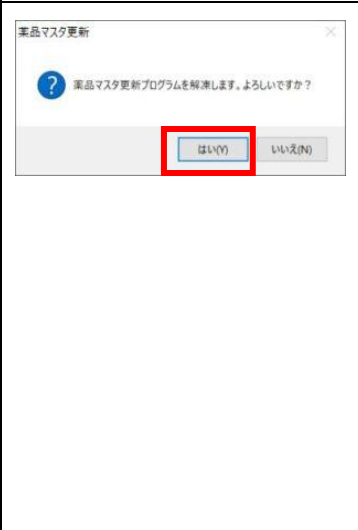
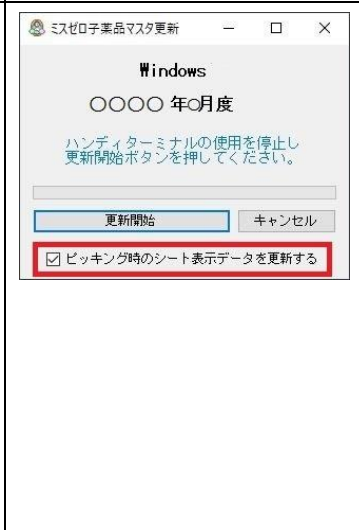
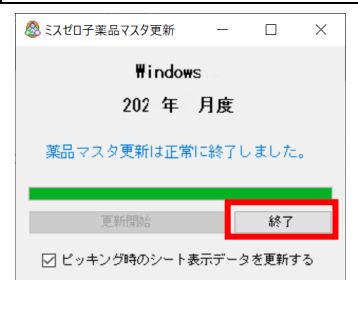

第 1 版

# 薬品マスタ更新手順書

## ミスゼロ子リモート方式

 <p>リモート開始</p>   <p>ミスゼロ子-クカメディカル    ミスゼロ子-クカメディカル</p>  <p>リモート終了</p>	<p>① ミスゼロ子パソコンのデスクトップ上にある「リモート開始」をダブルクリックします</p>	 <p>ミスゼロ子リモートコ... 調剤ミス“ゼロ”を実現 調剤業務のバーコードゼッケンシステム ミスゼロ子</p> <p>遠隔操作を受ける許可</p> <p>下記ID番号をサポート担当に伝えてください。</p> <p>使用中のID 数字が表示</p> <p>パスワード *****</p> <p>www.teamviewer.com    キャンセル</p> <p>● 接続準備完了 (安全な接続)</p>	<p>② ウィンドウが表示され、「使用中のID」の数字が表示されるまでお待ちください</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・数字が表示されると、インターネットにミスゼロ子パソコンが接続されます。</li></ul>
 <p>リモート開始</p>   <p>ミスゼロ子-クカメディカル    ミスゼロ子-クカメディカル</p>  <p>リモート終了</p>	<p>③ ミスゼロ子パソコンのデスクトップ上にある「ミスゼロ子-クカメディカル」をダブルクリックします</p> <p>(ブラウザの種類によりアイコンが違う場合があります)</p>	 <p>薬品マスタ</p>	<p>④ 「薬品マスタ」アイコンをクリックします</p>
 <p>ミスゼロ子パソコン Windows7ユーザー</p> <p>薬品マスタ更新 (EV MINI バージョン)</p> <p>EV MINI</p> <p>DOWNLOAD    • 2021年9月度薬品マスタ第2版をリリースしました 2021年10月4日</p>	<p>⑤ Windows7 ユーザー EV バージョンの DOWNLOAD ボタンをクリックします。</p>		

# 薬品マスタ更新手順書

 <p>ご連絡したパスワードを入力し送信ボタンを押してください。</p> <p>パスワード <input type="text"/> <input type="button" value="送信"/></p>	<p>⑥ パスワード入力画面が表示されます お知らせしましたパスワードを入力してください。</p>		
	<p>⑦ 保存先をデスクトップにします ・「保存(S)」をクリックします</p>		<p>⑧ ファイルをダブルクリックします</p>
	<p>⑨ 新しくフォルダが作成されます</p>		<p>⑩ フォルダ内の「【在庫】〇〇〇〇年〇〇月度プログラム第〇版 win10.exe」をダブルクリックして下さい。</p>
	<p>⑪ 「はい」をクリックしてしばらくお待ちください。</p>		<p>⑫ ハンディターミナルの使用を停止して「更新開始」をクリックしてください 【赤枠】 例) 処方数 30 錠の場合に 14 錠シートをピッキングすると「2 シート + 2」と表示される機能です。</p>
	<p>⑬ 「薬品マスタ更新は正常に終了しました。」と表示されます 「終了」をクリックし完了</p>		<p>⑭ デスクトップに保存されたフォルダとプログラムを削除してください</p>